

d0-HΛd-70 310,5 189,5 220 189,5 220



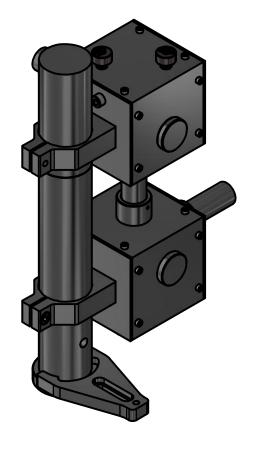

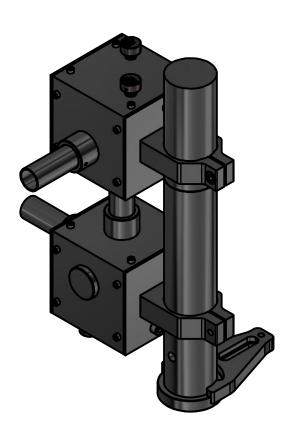

Универсальный перископ PVH-DP служит для изменения высоты оптического луча, его направления и поворота плоскости поляризации.

Установка луча по высоте происходит с помощью двух кронштейнов. Оправки для зеркал изготавливаются под размер, указанный заказчиком и закрепляются в юстируемых оправах МММ-В.

Юстировка входного зеркала осуществляется винтами с круглой головкой FAS-B25 сбоку на нижнем корпусе. Юстировка выходного луча происходит с помощью винтов с круглой головкой FAS-B25 сверху верхнего корпуса. В перископе PVH-DP весь тракт прохождения оптического луча закрыт пылезащитными корпусами.

Элементы перископа изготовлены из дюраля и подвергнуты химическому чернению.

				04-PVH-DP			
					/lum.	Масса	Масштаδ
Изм. Лисп	п № докум.	Подп.	Дата	Универсальный перескоп			
Разраб.						1,2	1:3
Προβ.						_	
Т. контр.					Λυςπ Λυςποβ 1		β 1
Нач.отд.					000 "ABECTA-ΠΡΟΕΚΤ"		
Н. контр.							
Утв.							

Копировал

М6х1 установочный паз

Формат АЗ